

PHỤ LỤC VIII
(Ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP)

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VIỆN AURA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ

Kính gửi: **SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP**

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
Số: 36.11.1u
ĐẾN Ngày: 28/7/2023
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:

- Tên cơ sở: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VIỆN AURA TẠI ĐỒNG THÁP
- Địa chỉ: PG4-01.02 Trương Định, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0969515653 Số Fax: Email:chro@auragroup.vn

II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:

STT	Họ và tên	Cơ sở cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề xăm, phun, thêu ⁴	Cơ sở chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học ⁵
1	VÕ THỊ KIỀU OANH	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM

III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu thiết bị (MODEL)	Nguồn gốc xuất xứ	Số lượng	Tình trạng sử dụng
1	Máy Giantsn 9430 mini	PA158787	Việt Nam	01	Tốt

IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG: ngày 28 tháng 7 năm 2023

V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: thực hiện các kỹ thuật chăm sóc da và các kỹ thuật phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU CƠ SỞ

(Ký ghi rõ họ tên)
THẨM MỸ VIỆN AURA
Nguyễn Xuân Sỹ

⁴ Đối với người có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo về phun, xăm, thêu trên da.

⁵ Đối với người có giấy chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

RECTOR

VIETNAM COLLEGE OF
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

has conferred

CERTIFICATE

Upon: **Ms Vo Thi Kieu Oanh**


Date of birth: **23 December 2002**

Completed training program:

Permanent make up

Course duration: **60 days, from 09/03/2022 to 09/05/2022**

At: **Viet Nam**

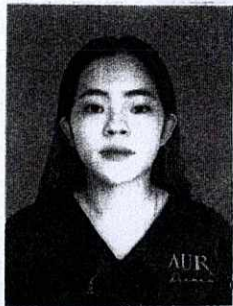

Reg. No: YDD223748

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

cấp

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Cho: **Võ Thị Kiều Oanh** Giới tính: **Nữ**

Ngày sinh: **23/12/2002**

Đã hoàn thành chương trình đào tạo: **Xăm, phun, thêu trên da,**

không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm

Thời gian học: **60 ngày, từ ngày 09/03/2022 đến ngày 09/05/2022**

Tại: **Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam**


Da Nang, 31 May 2022
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 2308
Quyển số 1-SCT/BS
Ngày 19 tháng 7 năm 2023



PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Minh Chí

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

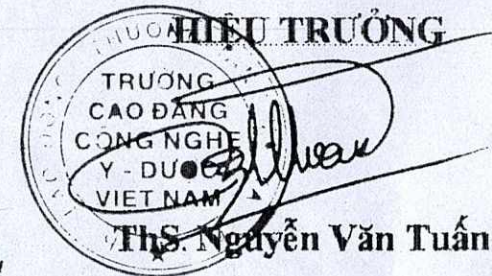

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Số hiệu: YDD013174

Số vào sổ cấp chứng chỉ: YDD223748

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM
VIETNAM COLLEGE OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Cấp cho (Name): **Võ Thị Kiều Oanh**

Ngày sinh (Date of birth): **23/12/2002**

Nơi sinh (Place of birth): **Đồng Tháp**

Đã hoàn thành Chương trình tập huấn An toàn y tế
(Completed the Health Safety Training Program)

**PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LÂY NHIỄM QUA ĐƯỜNG MÁU
VÀ DỊCH SINH HỌC TẠI CƠ SỞ THẨM MỸ**

Xếp loại (ranking): **Giỏi**

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực **2309** .. Quyền số **ĐCTBS** .. ngày **31** tháng **05** .. năm **2022**
Ngày **19** .. tháng **7** .. năm **2023** (Date) (Month) (Year)

PHÓ CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG



Số CN (No): **126/2022/QĐ-YDC**

Số vào sổ (Reg. No): **YDE00104** **Bản Minh Chí**

(Ký tên và đóng dấu - Sign and seal)
ThS. Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VIỆN QUỐC TẾ AURA

Địa chỉ: PG4-01, PG4-02 Vincom Shophouse, đường Trương Định, Phường 1,
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 0868888790

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHUN XĂM

STT	TÊN DỊCH VỤ	GIÁ
1	PHUN MÀY	600.000
2	PHUN MÔI	600.000
3	PHUN MÍ	500.000

XÁC NHẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẨM MỸ VIỆN
AURA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊM XUÂN SỸ

WARRANTY CERTIFICATE

MODEL :
DATE :
DEALER :

Observations:

1. This product is covered by a 6-month warranty
2. During the period of time, we shall provide services free of charge for all failure derived from non-human factors by presenting this card.
3. All repairs of units not dismantled by us, a service charge shall be due.
4. This card is valid without seal of the dealer.

Use Instruction Manual

Pending patent

Features

1. The needle hole is visible and applicable to a number of eyebrow streakers.
2. The replaceable needle holding tube is removable for cleaning and disinfection, it is also disposable for replacements and is free from loosening and dropping.
3. The product in reference comes with a variable-speed switch on top of the device providing a handy and prompt adjustment of speed.
4. In order to keep the white colorant from back-flow into the needle hole and the needle holding tube (with the needle hole, the white colorant will generate back-flow and there is no way to stop it); the most effective prevention is to provide with a sponge to keep the colorant from back-flowing or another colorant to remove the back-flow for life span of the device.

Features provided to fight the flaws in the eyebrow streakers available on the market:

- (1) Detachable eyebrow streaker housing, protective tube and unit cover
 - (2) The needle holding tube, needle hole are accessible for cleaning and removal for periodical maintenance so as to extend the use of the device.
5. The vertical jump of the needle assures a stable operation and enhanced friction resistance as well as speeding handling as a compact and durable unit.
 6. By pushing up or pulling down the protective tube, the needle is duly adjusted as a handy needle sleeve adjustment feature to insert the needle into skin to a fixed depth.
 7. All products are subject to sterilization ruled by sanitary requirements and are packed in units bearing disinfection instructions, please dispose it after use.

Observations

1. Please read carefully the Operation Instruction before use or check with the sales people.
2. To keep out infection by bacteria and safety of the customer, you are kindly requested to use brand new eyebrow streaking needles with casing and needle holding tube as well as sponge or Needle Sleeve.
3. After operation, the used eyebrow streaking needle, needle cover tube and sponge shall be removed and disposed accordingly.
4. After use, please check the needle holding tube, in case of remaining pigment between the needle holding tube and the sleeve, please remove the sleeve for cleaning or disinfection, then leave a drop of exclusive lubricant on the needle holding tube, then insert the interior needle into the needle holder and finally press it slightly into the housing and return to the original position.
5. Please do not leave the eyebrow streaker subject to heavy impacts.